

SZANOWNI PACJENCI

Protezy oczu z tworzywa sztucznego dzięki naturalnemu wyglądowi umożliwiają Państwu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Proszę pamiętać jednak o tym, że warunkiem długiego użytkowania protezy jest właściwe obchodzenie się z nią i prawidłowa pielęgnacja. Nie jest to trudne, zwłaszcza gdy zapoznacicie się Państwo z poniższymi wskazówkami.

Państwa proteza jest protezą indywidualną specjalnie dobraną i dopasowaną. Do wykonania protezy został użyty wysokiej jakości polimer od lat stosowany do produkcji protez oczu. Jego wysoka gładkość i odporność na płyny ustrojowe powoduje, że jest on dobrze tolerowany przez organizm. Zarówno cechy materiału jak i właściwe osadzenie protezy gwarantują Państwu dużą swobodę zarówno w pracy jak i w życiu codziennym - nie wykluczając uprawiania sportu.

PIELĘGNACJA PROTEZY


Proteza powinna być codziennie dokładnie umyta. Należy do tego używać letniej czystej wody. Użycie wody gorącej lub zimnej może źle wpływać na tworzywo; nie wolno też używać kwasów ani alkoholu, a także ostrych przedmiotów czy preparatów chemii gospodarczej. W przypadku mocnego zabrudzenia można protezę umieścić na 10 minut w roztworze soli kuchennej (łyżeczka soli na litr przegotowanej lub destylowanej wody). Proszę pamiętać, aby zawsze potem protezę dokładnie opłukać. Jeżeli proteza jest dłużej nieużywana, należy ją przechowywać w zamkniętym pudełku na sucho.

ZAKŁADANIE PROTEZY

Proszę pamiętać, aby zakładanie i wyjmowanie protezy wykonywać zawsze nad miękką powierzchnią.


Przed włożeniem proteza musi być dokładnie umyta. W każdym przypadku, aby ułatwić zakładanie protezy należy ją delikatnie zwilżyć. W większości węższa część protezy wskazuje nos, jednak nie jest to regułą, gdyż w czasie obróbki kształt protezy może ulec zmianie.

Zakładanie protezy należy rozpocząć od umieszczenia jej pod podniesioną górną powieką, następnie przytrzymując protezę, należy delikatnie odciągnąć dolną powiekę, co pozwoli protezie osiąść we właściwym miejscu. Należy teraz ostrożnie docisnąć protezę palcem, aby skorygować jej położenie i ewentualnie usunąć spód protezy powietrze.

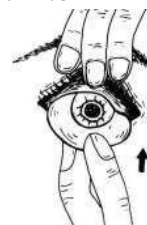

WYJMOWANIE PROTEZY

Przy wyjmowaniu protezy proszę pamiętać o miękkim podłożu, aby nie uszkodzić protezy przy ewentualnym upadku. Aby wyjąć protezę, należy odciągnąć dolną powiekę tak, by ukazał się brzeg protezy. Następnie należy wsunąć końcówkę kciuka pod brzeg protezy i przytrzymując protezę palcem wskazującym, wyciągnąć. Do wyjmowania protezy można też używać specjalnej łopatkki, jednak nie jest to konieczne.

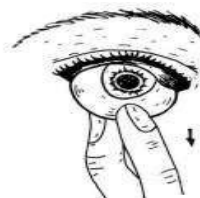

Proszę pamiętać, jeżeli pocieracie Państwo oko, zawsze należy to robić w kierunku do nosa. W innym wypadku – zwłaszcza przy pocieraniu w okolicach dolnej powieki- proteza może się obrócić lub wypaść.

OKRES UŻYWANIA PROTEZY

Okres używania protezy oka jest uzależniony od wielu czynników zarówno anatomicznych, jak i zewnętrznych. Proteza ulega też naturalnemu zużyciu choćby pod wpływem łez. Dzięki odpornemu materiałowi okres używania protezy jest relatywnie długi – wynosi 1-2 lat. W przypadku narażenia pacjenta na zwiększone zanieczyszczenie powietrza okres ten może być krótszy.

Zużyta proteza może urażać. Szorstka powierzchnia protezy powoduje stałe drażnienie błon śluzowych.

Pierwszą oznaką konieczności wymiany protezy jest wzmożone łzawienie. Oczodół zaczerwienia się i może pojawić się żółtawa, zawieszona wydzielina. W tym stadium należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby zapobiec rozległemu stanowi zapalnemu.

Kontrole okulistyczne i regularna wymiana protez zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa, komfort i wygodę.

W przypadku konieczności jakiegokolwiek korekty należy zwrócić się do pracowni.

Właściwe dobranie i dopasowanie protezy możliwe jest jedynie przy osobistym zgłoszeniu się do pracowni.

Naprawa stłuczonej lub pękniętej protezy nie jest możliwa.

Stłuczona lub połamana proteza może posłużyć jako wzór przy dopasowaniu kolejnej. Należy więc zachować wszystkie fragmenty.